

PROTOCOLOS

VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR
HEAVY & SLIM



PROTOCOLLO

VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR

SLIM



INTRODUÇÃO

O protocolo Ultra Contour Slim foi desenvolvido para atender uma demanda crescente por refinamento facial em pacientes com faces mais finas, onde o objetivo é reposicionar estruturas, melhorar o contorno e preservar a naturalidade dos traços.

Diferente de abordagens tradicionais, este protocolo considera a necessidade de um ajuste estratégico das regiões de disparo e vetores de tração, respeitando a anatomia individual e evitando sobrecarga de áreas já delgadas. O foco está em promover um lifting progressivo do terço médio, definição do contorno mandibular e melhora da qualidade da pele, com ganho de densidade e viço.


A combinação do Ultraformer MPT e Volnewmer foi estruturada para gerar um resultado gradual, harmônico e altamente controlado, evitando o aspecto artificial e garantindo integração entre lifting e qualidade cutânea. Este protocolo também se torna especialmente relevante no cenário atual de pacientes em uso de agonistas de GLP-1, que frequentemente evoluem com perda significativa de volume facial e redução do suporte estrutural, resultando em flacidez e alteração do contorno. Nesses casos, o Ultra Contour Slim atua como uma estratégia eficaz para reorganização tecidual, reposicionamento e estímulo de colágeno, sem a necessidade de volumização adicional.

PROTOCOLO
VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR SLIM

COMECE PELO **ULTRAFORMER MPT**

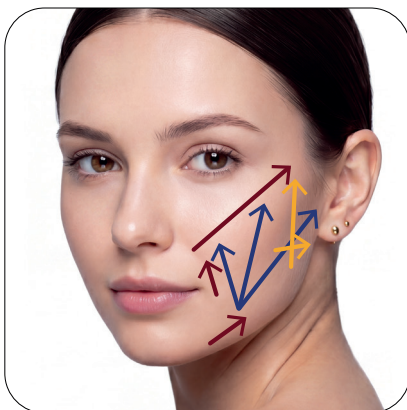

Realize o **protocolo de lifting** com Ultraformer MPT

PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 4,5mm	RETROLIGAMENTAR	0,8J	NORMAL	1,5	35
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 3,0mm	RETROLIGAMENTAR	0,5 - 0,6J	NORMAL	1,5	70
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 2,0mm	ZIGOMÁTICA/TEMPORAL	0,3J	NORMAL	1,5	50
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 2,0mm	JOWL	0,4J	MP	-	30

*A QUANTIDADE DE DISPAROS SÃO CORRESPONDENTES A HEMIFACE.

PROTOCOLO
VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR SLIM

ULTRAFORMER MPT



PONTEIRA	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 4.5mm	0.6 - 0.8J	NORMAL	1.5	70
PONTEIRA	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 3.0mm	0.4 - 0.6J	NORMAL	1.5	70
PONTEIRA	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
BOOSTER 3.0mm	0.5 - 0.8J	MP OU NORMAL	1.5	70

PROTOCOLO
VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR SLIM

VOLNEWMER



ÁREA DE TRATAMENTO

TERÇO MÉDIO INFERIOR

TIP

F (3.0)

NÍVEL DE INICIALIZAÇÃO

2.5 - 3.5

PASSES

INICIALIZAÇÃO

2 - 3 passes

VETOR

3 - 4 passes

DISPAROS


300 ~ 400

PROTOCOLO
VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR SLIM

VOLNEWMER

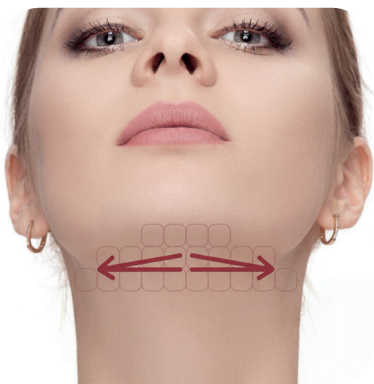

ÁREA DE TRATAMENTO

Submento

TIP

F (3.0)

NÍVEL DE INICIALIZAÇÃO

2.5 - 2.5

PASSES

INICIALIZAÇÃO

3 - 4 passes

VETOR

-

DISPAROS

50 - 100

ULTRAFORMER PARA FINALIZAR



PONTEIRA

Booster 1.5

ENERGIA

0.2J

MODO

MP

DISPAROS

100 com DSB

PROTOCOLLO

VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR

HEAVY



INTRODUÇÃO


O protocolo Ultra Contour Heavy é indicado para pacientes com faces mais volumosas e/ou pesadas, com acúmulo de gordura e flacidez, onde a principal demanda é a redefinição do contorno facial associada ao efeito lifting e à reorganização de volume. A abordagem envolve atuação em múltiplos planos, incluindo camadas profundas, com planejamento estratégico dos disparos para promover contração tecidual, melhora do suporte estrutural e maior definição facial, especialmente em regiões críticas como jowl, submento e terço inferior.

A sinergia entre o Ultraformer MPT, com foco em efeito lifting e suporte estrutural profundo, e o Volnewmer, voltado à redensificação dérmica e melhora da qualidade da pele, promove um resultado tridimensional. Ambas as tecnologias atuam no estímulo de colágeno, de forma complementar, contribuindo para melhora do contorno, da densidade dérmica e do aspecto global da pele.

O protocolo também é especialmente indicado para pacientes pós-emagrecimento, incluindo usuários de GLP-1, que apresentam flacidez e peso residual, oferecendo uma abordagem completa, progressiva e personalizada para o tratamento de faces pesadas.

PROTOCOLO
VOLFORMER
VOLNEWMER / ULTRAFORMER
ULTRA CONTOUR HEAVY

COMECE PELO **ULTRAFORMER MPT**

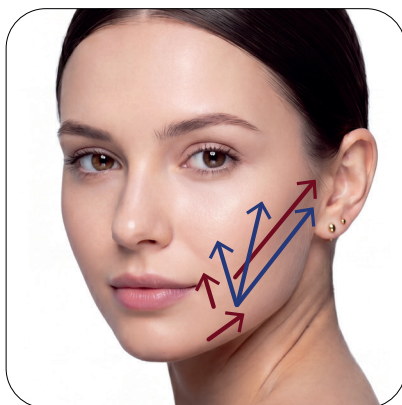


Realize o **protocolo de lifting** com Ultraformer MPT

PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 4,5mm	VETORES ASCENDENTE, LATERAL E OBLÍQUO	0,8J	MP E NORMAL (50% - 50%)	1,5	100
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 3,0mm	VETORES ASCENDENTE, LATERAL E OBLÍQUO	0,5 - 0,6J	MP E NORMAL (50% - 50%)	1,5	100
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 2,0mm	ZIGOMÁTICA/ TEMPORAL	0,3J	NORMAL	1,5	50
PONTEIRA	REGIÃO	ENERGIA	MODO	PITCH	DISPAROS
LINHA 2,0mm	JOWL	0,4J	MP	-	30

REALIZAR OS DISPAROS NO MODO MP NA PORÇÃO ANTERIOR DOS LIGAMENTOS
E MODO NORMAL NA PORÇÃO POSTERIOR A LINHA DOS LIGAMENTOS

PROTOCOLO
VOLFORMER
VOLNEWMER / ULTRAFORMER
ULTRA CONTOUR HEAVY

ULTRAFORMER MPT

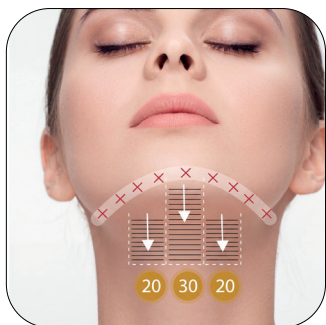

A	PONTEIRA	ENERGIA	MODO	DISPAROS
	LINHA 6.0mm	0.8 - 1.0J	MP	70 NA REGIÃO CENTRAL (AVALIAR PREGA CUTÂNEA)
B	PONTEIRA	ENERGIA	MODO	DISPAROS
	LINHA 4.5mm	0.8 - 1.0J	NORMAL	70
	PONTEIRA	ENERGIA	MODO	DISPAROS
C	BOOSTER 3.0mm	0.5 - 0.8J	NORMAL	70
	PONTEIRA	ENERGIA	MODO	DISPAROS
C	BOOSTER 4.5mm	0.5 - 0.8J	MP	70

*RECOMENDA A AVALIAÇÃO DO PACIENTE APÓS 45 DIAS PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE UMA NOVA SESSÃO PARA REDUÇÃO DE GORDURA.

PROTOCOLO
VOLFORMER
VOLNEWMER / ULTRAFORMER
ULTRA CONTOUR HEAVY

VOLNEWMER




ÁREA DE TRATAMENTO		TERÇO MÉDIO INFERIOR
TIP		F (4.0)
NÍVEL DE INICIALIZAÇÃO		2.5 - 4.5
PASSES	INICIALIZAÇÃO	2 - 3 passes
	VETOR	3 - 4 passes
DISPAROS		300 - 400

VOLFORMER

VOLNEWMER / ULTRAFORMER

ULTRA CONTOUR HEAVY

VOLNEWMER

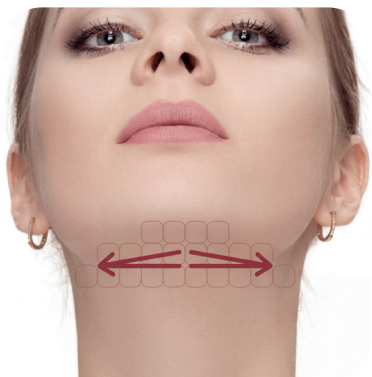

ÁREA DE TRATAMENTO

Submento

TIP

F (3.0) / V (4.0)

NÍVEL DE INICIALIZAÇÃO

2.0 - 2.5

PASSES

INICIALIZAÇÃO

3 - 4 passes

VETOR

-

DISPAROS

50 - 100

ULTRAFORMER PARA FINALIZAR



PONTEIRA

Booster 1.5

ENERGIA

0.2J

MODO

MP

DISPAROS

100 com DSB

